

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

SCHGZLY7KTX7XI90BV9



Ραβδί Φωτοθεραπείας

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

- Υλικό: Αλουμίνιο + ABS + PC
- Τάση εισόδου: 5V= 1A
- Ισχύς: 1.67W
- Καθαρό βάρος: 90g
- Χωρητικότητα μπαταρίας: 350 mAh
- Χρόνος φόρτισης: 120 λεπτά
- Τροφοδοσία: Καλώδιο φόρτισης USB
- Διαστάσεις προϊόντος: 142×45×27 mm

Περιλαμβάνονται:

- Συσκευή ×1
- Καλώδιο φόρτισης ×1
- Εγχειρίδιο ×1

Χαρακτηριστικά Προϊόντος

- Περιστροφή κεφαλής 270°
- Κόκκινο φως 630 nm–690 nm
- Φωτεινή επιφάνεια με ένδειξη LED κατά την έναρξη λειτουργίας


Υλικό σώματος: Αλουμίνιο κράμα

Τροφοδοσία: USB καλώδιο φόρτισης

Πώς λειτουργεί;

Το κόκκινο φως **630nm** είναι ιδανικό για στόχευση στα βαθύτερα στρώματα της επιδερμίδας. Διεισδύει στο δέρμα και προάγει:

- Αναγέννηση κολλαγόνου
- Βελτίωση ελαστικότητας
- Κυτταρική αναζωογόνηση
- Μείωση ρυτίδων

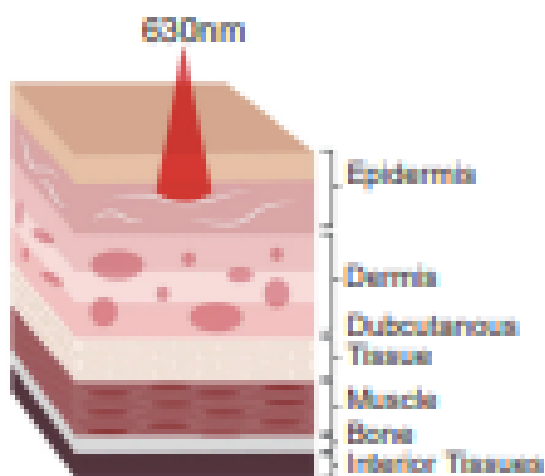

Λειτουργίες Συσκευής

- **Ηχητική δόνηση (Sound wave vibration)**
 - **Διείσδυση πρωτεϊνών (Protein penetration)**
 - **EMS Μικρορεύματα (EMS Biological Microcurrent)**
 - **Εισαγωγή μαγνητοκαλλιέργειας (Magnetocaloric Import)**
-

Βήματα Χρήσης

Βήμα 1: Καθαρίστε το πρόσωπο με ήπιο καθαριστικό. Σκουπίστε.

Βήμα 2: Απλώστε λοσιόν ή ορό στο πρόσωπο.

Βήμα 3: Χρησιμοποιήστε τη συσκευή γύρω από τα μάτια, στο μέτωπο ή όπου υπάρχουν λεπτές γραμμές.

Βήμα 4: Χρησιμοποιήστε για μασάζ, κινώντας τη συσκευή προς τα πάνω και προς τα έξω.

Βήμα 5: Μετά τη χρήση, σκουπίστε τη συσκευή με μαλακό πανί.

Ορθή Απόρριψη

Αυτή η συσκευή συμμορφώνεται με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2002/96/EC για απόρριψη ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών αποβλήτων.

- Μην απορρίπτετε με τα οικιακά σκουπίδια.
 - Παραδώστε σε ειδικά σημεία συλλογής.
-

Απόρριψη Μπαταρίας

Για να μειωθεί η επιβάρυνση στο περιβάλλον, απορρίψτε τη μπαταρία σύμφωνα με τους κανονισμούς.

- Αντικαταστήστε με μπαταρία ίδιου τύπου.
 - Μην πετάτε σε φωτιά ή νερό.
-

Πληροφορίες FCC

- Η συσκευή συμμορφώνεται με τους κανονισμούς FCC.
 - Μπορεί να προκαλέσει παρεμβολές σε άλλες συσκευές ραδιοσυχνοτήτων.
 - Αν παρουσιαστούν προβλήματα, επανατοποθετήστε ή απομακρύνετε τη συσκευή.
-

Τρόπος Φόρτισης

- Συνδέστε το καλώδιο USB σε θύρα υπολογιστή ή φορτιστή.
 - Χρόνος φόρτισης: περίπου 2 ώρες.
 - Μην υπερφορτίζετε πάνω από 10 ώρες.
-

Ενδείξεις Φόρτισης

- Κατά τη φόρτιση, το λαμπάκι αναβοσβήνει.
 - Όταν φορτιστεί πλήρως, παραμένει σταθερά αναμμένο.
-

Σημαντικές Οδηγίες Χρήσης

- Μην χρησιμοποιείτε κοντά σε νερό ή υψηλή υγρασία.
- Μην χρησιμοποιείτε κατά τη διάρκεια ύπνου.
- Αν παρατηρήσετε ερεθισμό, σταματήστε τη χρήση.
- Φυλάξτε το προϊόν μακριά από παιδιά.